


Manual de uso InCube

Paso 1.- Introducir credenciales necesarias y aceptar la política de privacidad.




Paso 2.- Una vez dentro podrás navegar entre 5 pantallas entre las cuales se encuentran el regulador de luz, los registros actuales y un histórico, la puerta de la incubadora, una gráfica que muestra las medias de luz y temperatura y la pantalla de registro para el administrador.


Pantalla de regulador de luz. – En esta pantalla se podrá regular la luz con la rueda para luego enviar el valor seleccionado a la incubadora, modificando así el valor de luz actual.

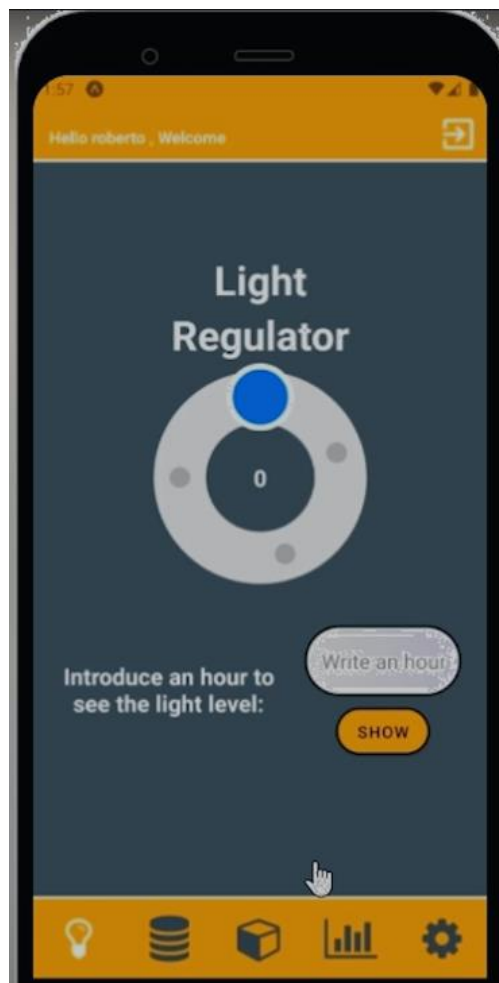

Pantalla de datos actuales. – En esta pantalla podrás sacar la luz y la temperatura actuales, así como introducir valores para determinar cuantos registros y cada cuanto para crear un histórico.

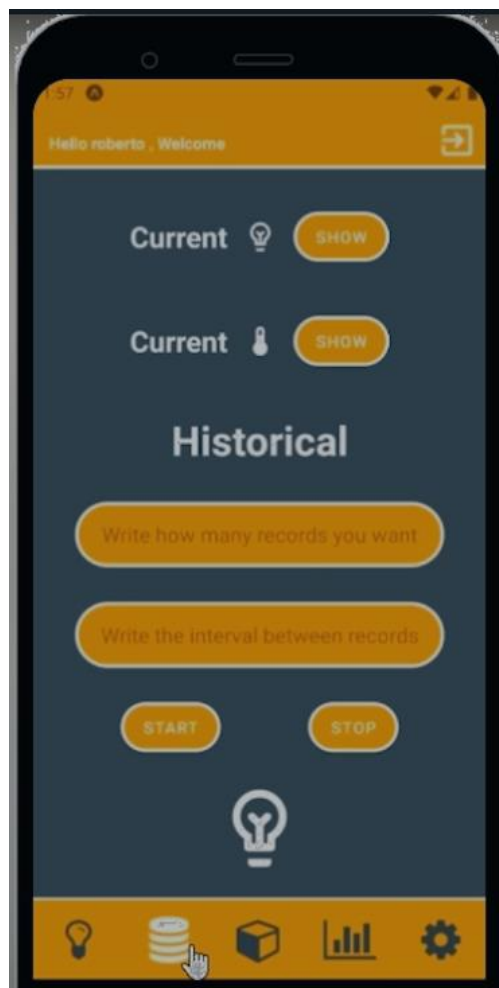


Pantalla de puerta. – En esta pantalla se podrá abrir y cerrar la puerta de la incubadora.

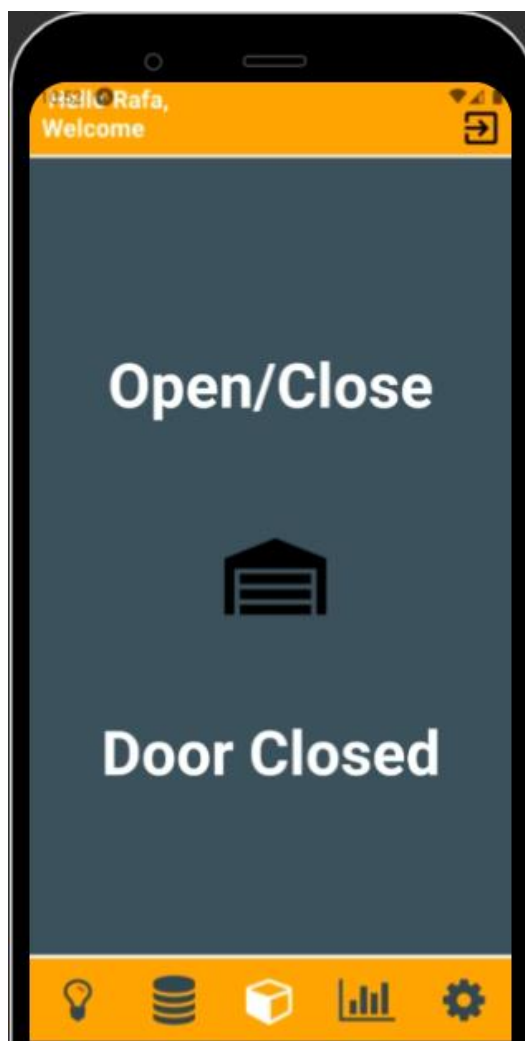

Pantalla de la gráfica. – En esta pantalla podrás introducir una fecha concreta para ver los registros de esta y sus medias tanto de luz como de temperatura.



Pantalla de registro para administrador. – Esta pantalla solo será accesible si eres administrador, en tal caso podrás dar de alta nuevos empleados creando el nombre de usuario y contraseña.

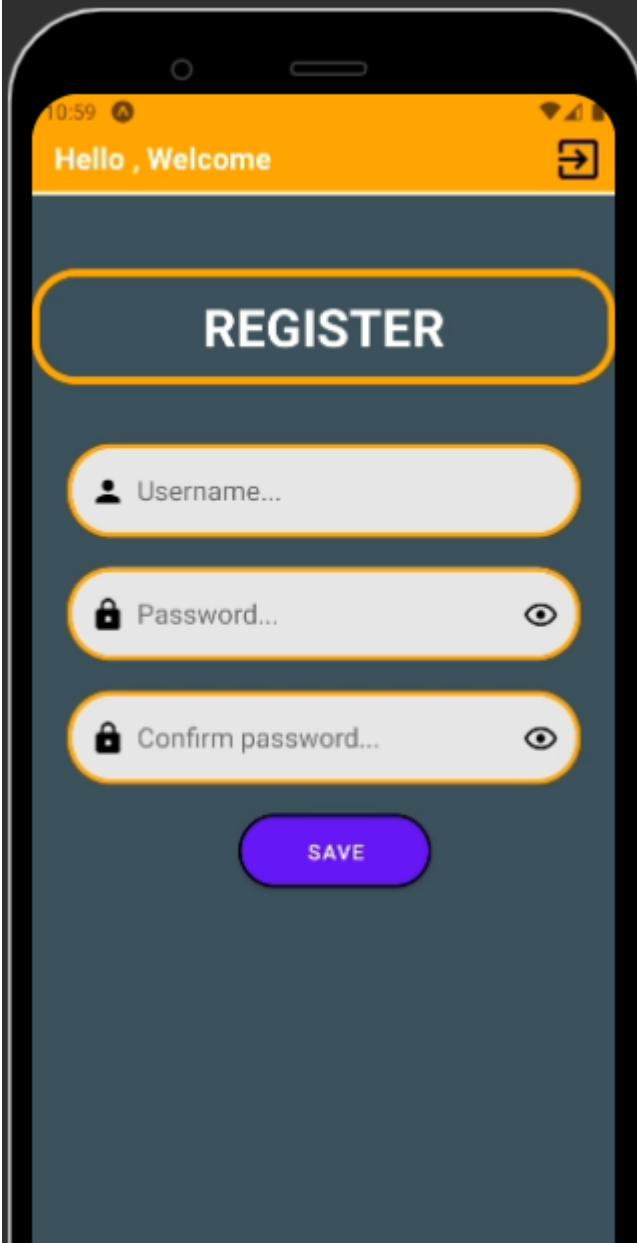

The image shows a mobile application interface for a registration screen. At the top, there is an orange header bar with the text "Hello , Welcome" and a small icon on the right. Below the header, the word "REGISTER" is displayed in white capital letters inside a dark blue rounded rectangle. Underneath, there are three input fields: "Username..." with a person icon, "Password..." with a lock icon and a toggle eye icon, and "Confirm password..." with a lock icon and a toggle eye icon. At the bottom, there is a purple rounded button labeled "SAVE".